

保証書

製品名	クールフラッシュデピ	型番	YMO-94RD
お買い上げ日	年 月 日 より1年間		
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話番号		
販売店			

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。本保証書、もしくはお買い上げ明細書のご提示がない場合、保証期間内であっても保証対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましても、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】

- 1.本保証書もしくはお買い上げ明細書のご提示がない場合。
- 2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
- 3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- 4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
- 5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
- 6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
- 7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

【その他】

- 1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- 3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
- 4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
- 5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 7.キセノンランプは保証対象外です。



保管用
保証書付

取扱説明書 一般家庭用



Cool Flash Depi

- お買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

光とラジオ波のダブルアクションで キレイなスベスベ肌に

お肌にやさしいムダ毛ケア。

1. キセノンフラッシュ

キセノンフラッシュの光は黒色や濃い色に反応して熱が発生する性質があります。この性質を利用して一瞬の光の熱エネルギーでムダ毛に熱をくわえてダメージを与え、ムダ毛ケアを行います。

2. ラジオ波

ラジオ波(RF)の高周波は色素に関係なく働きかける性質があるため、光とラジオ波を組み合わせたダブルアクションで効率よくお手入れを行います。

3. 冷やす

キセノンフラッシュの光の照射と同時にお肌を冷やすことで、お肌に熱が伝わりにくくなるので、照射時の熱さを軽減。熱さの感じやすい部位でもお肌にやさしくムダ毛ケアが行えます。

4. 美肌フラッシュ

トリプルフラッシュの弱い光の熱エネルギーでお肌にやさしい刺激を与えて、キレイな肌へ。

もくじ

安全上のご注意	3~7
セット内容と各部の名称	8
キレイになるためのポイント	9~10
お手入れの流れ	11~12
使い方	13~19
使い終わったら	20~21
故障かな?と思ったら	22
よくあるお問い合わせ	23~24
製品仕様	25
保証とアフターサービスについて	26
保証書	裏表紙

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(図記号の例)

 してはいけない内容です。  実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

次のような医用電子機器との併用は絶対にしない。



必ず守る

- ペースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用
- 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用
- 心電計などの装着型の医用電子機器との併用
- 他の医用機器との併用
医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。

⚠ 警告

次のような方は使用しない。
(ご使用前に医師に相談してください)

- 心臓障害
- 内臓障害
- 悪性腫瘍
- 急性疾患
- 感染症疾患
- 熱疾患
- 血圧異常
- 光過敏症
- アレルギー体質
- 糖尿病
- 健康がすぐれない
- 妊娠中
- ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用
- 睡眠薬を服用中
- 3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた
- 意思表示の出来ない
- 生理中
- 泥酔
- 幼児



禁止

次のような部位には使用しない。

- 目の周辺
- まぶた
- 耳の周辺
- 口内
- 陰部
- 傷口
- 粘膜部
- 皮膚に異常がある
- ほくろ
- イボ
- あざ
- ニキビ
- 炎症
- 化膿
- 色素沈着
- 刺青(タトゥー)
- 黒色や茶色、茶褐色の肌
- 日焼けで赤く、ヒリヒリしている
- シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる



禁止

身体に異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。
やけどや水泡、かゆみ、炎症などお肌に異常が生じた場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
美容目的以外に使用しない。
取扱説明書及び添付書類記載以外の使用については絶対にしない。
使用時間及び使用頻度は必ず守る。
本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。
お肌を傷つけたり、炎症、やけど、事故、トラブルの原因になります。



必ず守る

警告



禁止

ACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだり、重い物を乗せたりしない。
火災や感電、ショート、やけどの原因になります。



必ず守る

必ず交流100V～240Vで使用する。
事故、火災、故障の原因になります。



必ず守る

必ず専用のACアダプターを使用する。
事故、火災、故障の原因になります。



必ず守る

使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。
事故、火災、故障の原因になります。



必ず守る

ACアダプターにほこりが付着しないよう定期的に清掃する。
ほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。



禁止

照射部をのぞき込んでキセノンフラッシュの光を直視しない。
目を痛める原因になります。



必ず守る

ACアダプターをコンセントから抜くときはコードを持たずに必ずACアダプターを持って抜く。
感電の原因になります。



水濡れ禁止

風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。
絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電やショートの原因になります。



禁止

子供の手の届かない所に保管し、子供には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。



禁止

火気(ストーブ・熱器具)や危険物のそばでは使用したり、保管しない。
火災、爆発、変形の原因になります。



分解禁止

分解、改造、修理はしない。
感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。



禁止

本体内部に異物を入れない。
事故や火災、感電、故障の原因になります。

注意



禁止

他の美容器との同時使用はしない。
事故やケガ、トラブルの原因になります。



禁止

他の機器の部品を使用しない。
事故やケガ、トラブルの原因になります。



禁止

落としたり、ぶつけたりしない。
故障やケガ、事故の原因になります。



禁止

本体の通気口をふさがない。
水や異物が入らないようにする。
発煙や発火、故障の原因になります。



禁止

髪の毛や衣服に照射しない。
焦げたり変色の原因になります。



禁止

暗い所では使用しない。
目に一時的な刺激を感じ、視界が悪くなる恐れがあります。



必ず守る

ご使用前に発光面のフィルターの割れ、破損がないか確認する。
肌を傷つける原因になります。



必ず守る

強い痛みを感じた場合は使用を中断する。
そのまま使用を続けると悪化する原因になります。




必ず守る

照射中に熱いと感じた場合はすぐに照射部をお肌からはなして、お肌を冷やす。
発赤や炎症、やけどの原因になります。


使用上のお願い

- 照射部分のムダ毛をカミソリやシェーバーなどで剃ってください。
お肌の表面にムダ毛が残った状態で照射すると、熱く感じたり、やけどする原因になります。
また、効果も現れにくくなります。
- ムダ毛をワックスやピンセットで抜かないでください。
- 除毛剤は使用しないでください。
- 初めてご使用になるときはパッチテストを行ってください。
美肌モードで出力レベルを0に設定し、腕の内側に2~3回照射してください。
そして2~3時間後お肌に異常がないことを確認してから使用してください。
- 照射後は必ず冷却機能でお肌を冷やしてください。また、お肌の弱い方や敏感肌の方は照射前にお肌を冷やしてから照射してください。
- 出力の設定はお肌の異常がない事を確認してから、徐々に出力を上げてください。特に顔をご使用になる場合は慎重に行ってください。
- 目の周りや眉毛には絶対に使用しないでください。
頬より下側をご使用ください。
- 濡れたお肌に使用しないでください。
- 体調やお肌の状態によって熱さの感じ方は異なります。必ずお手入れ毎にお肌の様子を見ながら出力確認を行ってください。
- 照射した部分のお肌が赤くなったり、ヒリヒリしたり、熱をもったりすることがあります。
このような症状が現れた場合、よく冷やしてください。
- 同一箇所に連続照射を行わないでください。
多少の重複は問題ありませんが、過度の照射はお肌の負担となり炎症の原因になります。
- 当日照射した部分は温めないでください。
- 1回20分以上連続して使用しないでください。
冷却機能の冷え方が弱くなったり、照射部が熱くなります。
- 照射部が熱くなってきたり、冷却機能の冷え方が弱くなってきたときは1時間以上本体を休めてください。
- 冷却温度は使用環境の温度により影響を受けます。
室温30度以上の環境では冷えにくくなります。
- 使用後はACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 温度や湿度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では保管しないでください。
- 本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

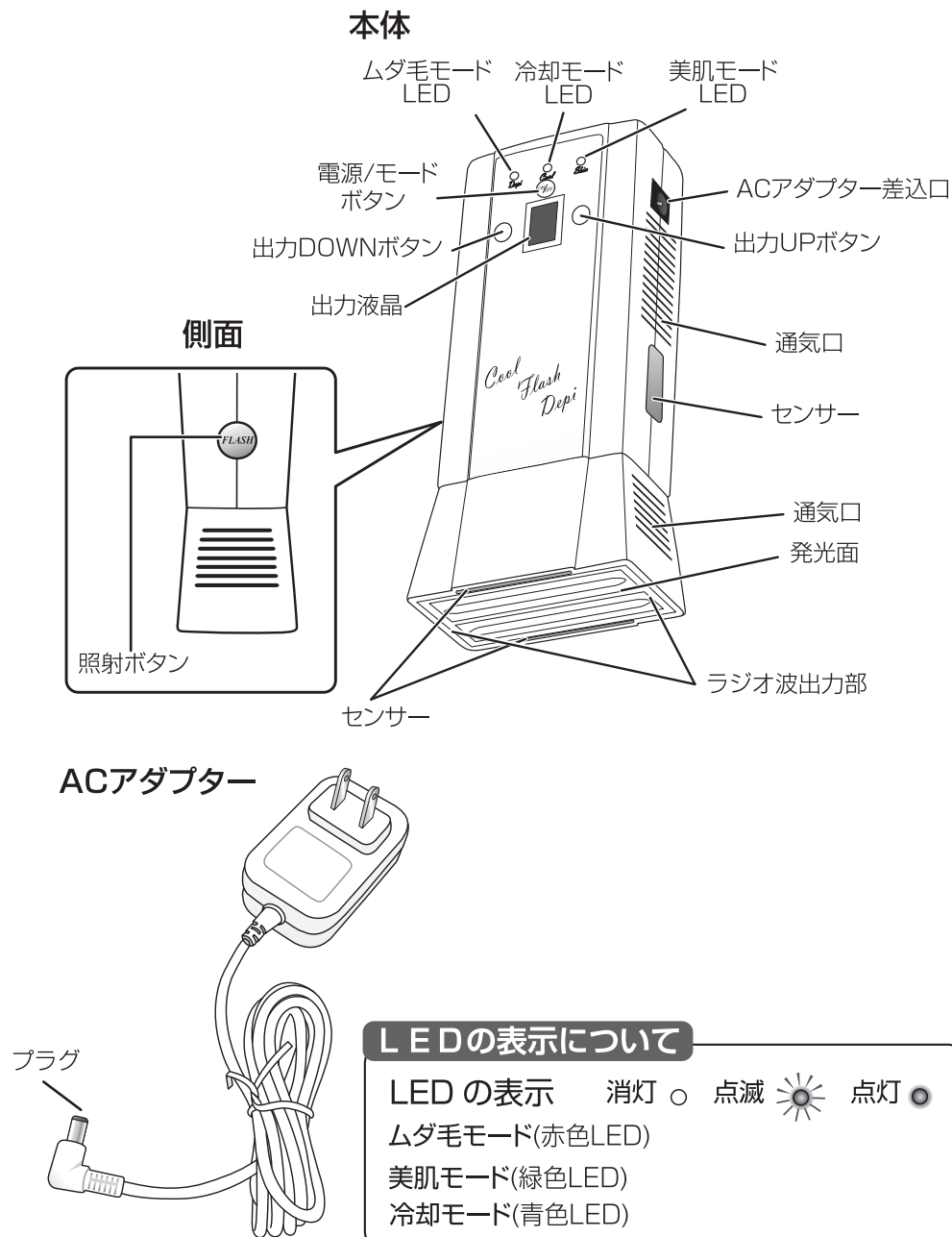


キレイになるためのポイント

お手入れできる部位

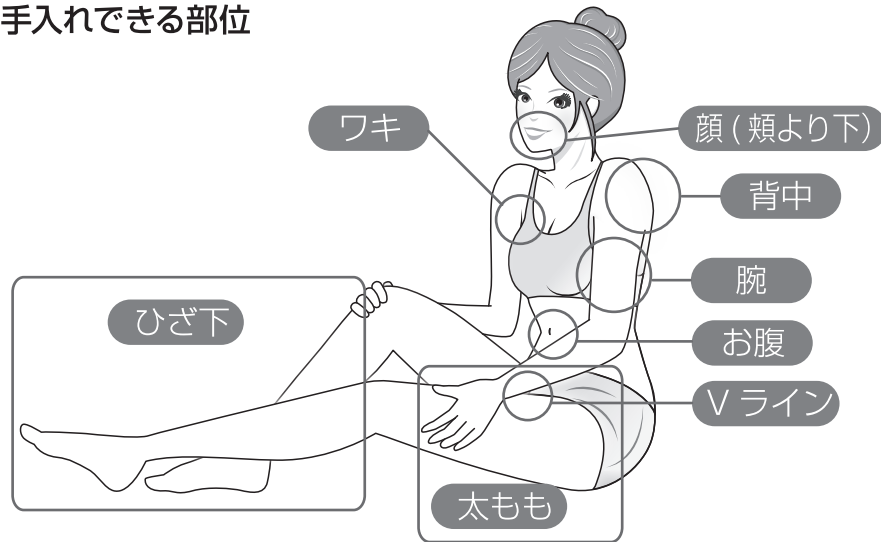

ムダ毛のしくみ

体毛の生えかわりには成長期、退行期、休止期の3つの周期があり、このサイクルを毛周期と言います。ムダ毛のお手入れには皮膚の表面に毛が生えている成長期が適しています。しかし、表面に生えている毛の全てが成長期という事もなく、さまざまな周期の体毛が混在していて、それぞれ1本1本異なります。部位によっても異なりますが、皮膚表面に生えている成長期の体毛はおおよそ1/3程度です。よって皮膚表面にでている体毛を全てお手入れしても、皮膚の下には毛が隠れており、成長期に変わるまでは時間が掛かります。ムダ毛のお手入れは毛周期に合わせて繰り返しお手入れする必要がありますため、ご自身のお肌やムダ毛の状態にあわせて根気よく続ける必要があります。

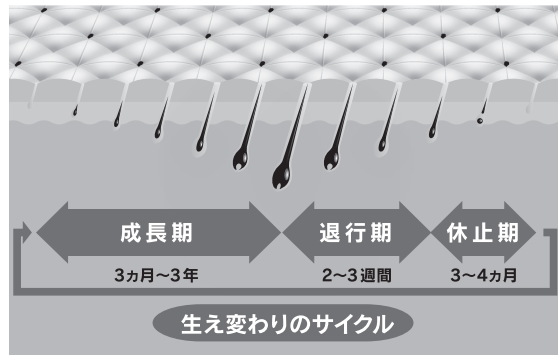

キレイになるためのポイント

お手入れ間隔の目安

ムダ毛のお手入れ

START

最初の3ヵ月
週2~3回程度

4ヵ月以降
週1回程度

続ける

気になる時だけ!

スキンケア

START

週2~3回程度
気になる方は毎日

続ける

お手入れは計画的に

- 1日に長時間するよりも短い時間で継続的にすることで様々な負担の軽減につながります。一度に広範囲の部位をするのではなく、1日一部のお手入れをおすすめします。
- 同一部位を照射する場合、ムダ毛のお手入れは2日以上期間をあけて計画的に行ってください。過度のお手入れはお肌に負担を与える原因になります。スキンケアのお手入れは毎日行っても大丈夫です。お肌が特に気になる方は毎日行ってください。
- 効果の実感が感じられない場合は、初期のお手入れ頻度を継続してください。

お手入れの流れ

初めての方はパッチテストをしてください

1. 照射する部分のお肌をキレイにしてください。
2. 腕の内側など照射しやすい部位のムダ毛をカミソリやシェーバーなどで剃ってください。
※ムダ毛が伸びていない場合は、剃毛をする必要はありません。
3. 本体の電源を入れて、ムダ毛モード、もしくは美肌モードの出力0に設定してください。
3. 発光面をずらしながら2~3回フラッシュの照射を行ってください。
4. 2~3時間後お肌に何も異常が起きなければテスト完了です。

お手入れの流れ


初めてお手入れを行う場合はやりやすい腕からがおすすめです。

1. お肌をキレイにする。



照射する部分のお化粧品や汚れを落として、お肌を清潔で乾燥した状態にしてください。

2. カミソリなどでムダ毛を剃る。

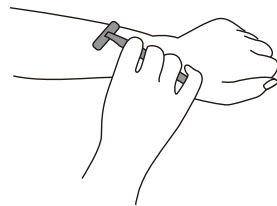

カミソリやシェーバーなどでムダ毛のシェービングを行ってください。 **P13 参照**

スキンケアのお手入れはムダ毛を剃る必要はありません。

お手入れの流れ

お手入れのコツ【お手入れを行う上で重要な内容です】

1. 照射する部位のムダ毛を剃ってください。
2. お肌に異常が起こっていないことを確認の上、ムダ毛や部位、お肌の状態に合わせて出力の設定を行ってください。
3. 出力の設定は出力1から行い、お肌の様子を見ながら徐々に上げてください。
4. 発光面をずらしながら照射してください。多少重なっても大丈夫ですが、同じ箇所に連続照射をしないでください。
5. フラッシュを照射することによりお肌に熱を持つ場合があります。冷却機能でお肌を冷やすことでお肌をやさしくいたします。お肌の弱い方や敏感肌の方は照射後必ず冷やしてください。照射後お肌が赤くなる方は、照射前にお肌をよく冷やしてください。

3. フラッシュを照射する。



側面のセンサーに触れながら、発光面のセンサーとラジオ波出力部が肌に密着するように垂直にあてて、照射ボタンを押して、フラッシュを発光させてください。 **P17 参照**

4. お肌をクールダウンさせる。



照射後そのままの状態でお肌を冷やしてクールダウンをさせてください。 **P19 参照**


使い方

1. お肌をきれいにしましょう

照射する部位のお化粧品や汚れを落としてください。

2. ムダ毛を剃りましょう

カミソリやシェーバーなどでムダ毛のシェービングを行ってください。

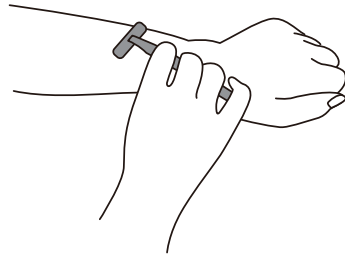


⚠️ ワックスや毛抜きなどでムダ毛を完全に抜かないでください。


⚠️ 除毛剤は使用しないでください。

⚠️ シェービングを行ってから数日後ムダ毛の長さが約1mm程度になった状態で照射を行うと効率のよい照射が可能です。濃い毛などは伸ばさないで照射してください。

3. ACアダプターのプラグを本体のACアダプター差込口に差し込んでください。

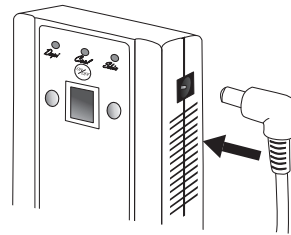


4. ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

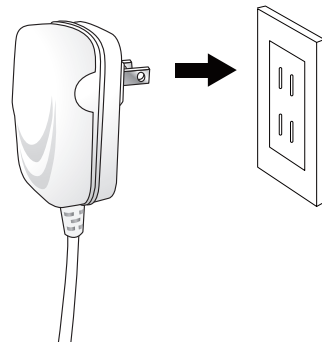

使い方

5. 電源をONにする

本体の電源/モードボタンを押してください。
ムダ毛モードの赤色LEDと出力液晶が点滅し、冷却の青色LEDが点灯します。

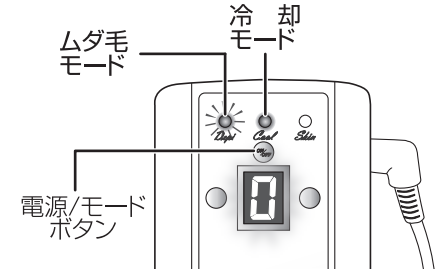


電源を入れると20分タイマーが作動します。
また、5分間何も操作がないと自動的に電源がOFFになります。

6. 照射の準備

電源をONにしてから最大約12秒後、出力液晶が点滅から点灯に切り替わり、フラッシュの照射準備が完了になります。


※ムダ毛モードLEDは点滅した状態のままです。

※本体の状況によって照射準備完了する時間は変わります。

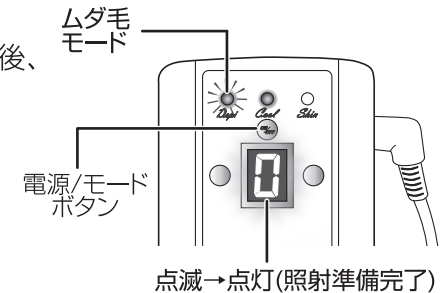


7. 照射モード設定

電源/モードボタンを押してモードの選択をしてください。設定したモードのLEDが点灯します。

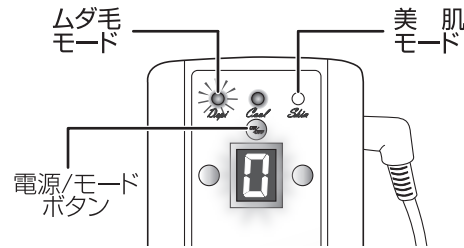


ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

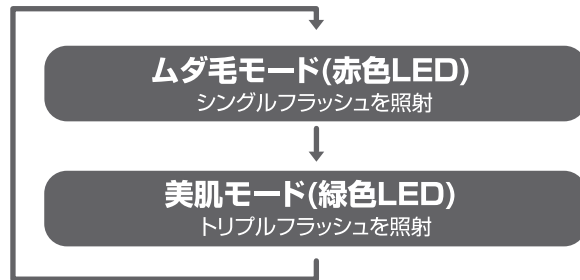

お手入れする目的に合わせてモードを選んでください。

美肌モードでお手入れする場合は、冷却を使用しなくてもよいです。


冷却機能をOFFにする場合
電源OFFの時に電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。
冷却の青色LEDは消灯した状態になります。

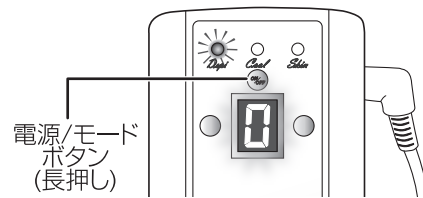

8. 出力設定

出力UP、DOWNボタンを押して出力設定を行ってください。

出力目安を参考にお手入れする部位やムダ毛の状態に合わせて設定してください。

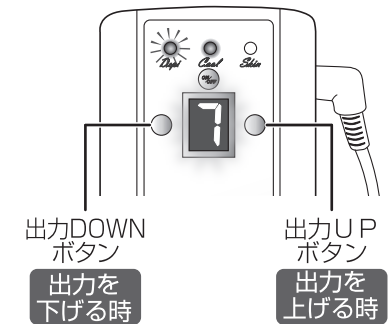

フラッシュの出力目安			
ムダ毛モード	美肌モード	出力	出力パワー
指、うぶ毛	赤ら顔	1~4	弱 ↓ 強
腕、脚	くすんだ肌	4~6	
ワキ、ビキニライン	キメ、ハリ	6~8	
剛毛	ダメージ肌	8~9	


⚠️ 必ずお手入れするたびに出力確認を行ってください。体調やお肌の状態によって熱さの感じ方は異なります。

⚠️ 各部位ごとに必ず出力確認を行ってください。部位によって熱さの感じ方が異なります。

9. 正しいあて方

発光面をお肌に直角にあてて、ラジオ波出力部とセンサーをしっかりと密着させてください。




発光面の2ヶ所のセンサーと側面のセンサーに正しく触れると設定したモードLEDが点滅から点灯に変わり、照射が行える状態になります。

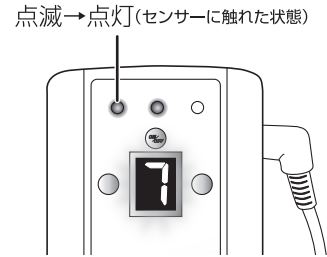

⚠ 3つのセンサーを同時に正しく触れないと照射できません。

⚠ お肌が乾燥していると、センサーに触れても反応しない場合があります。このような場合は化粧水などで保湿を行ってください。

⚠ 両側のラジオ波出力部に触れていないとラジオ波は伝わりません。

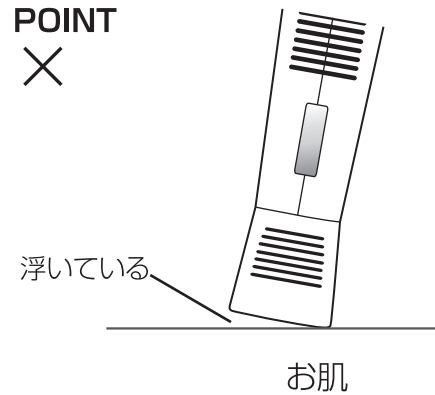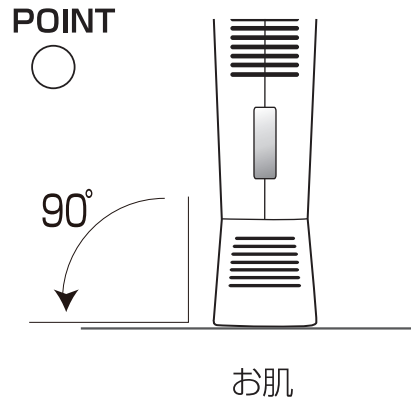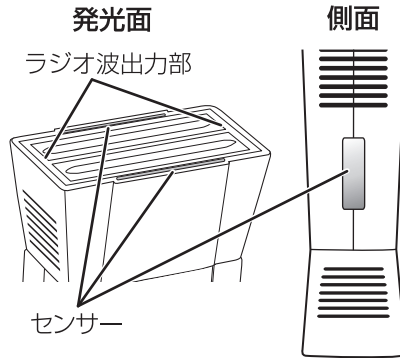


ムダ毛ケアもスキンケアのお手入れもあて方は同じです。

10. 照射する

出力液晶が点灯している状態で、照射ボタンを押すと、フラッシュが発光します。


⚠ 3つのセンサーを同時に正しく触れないと照射できません。

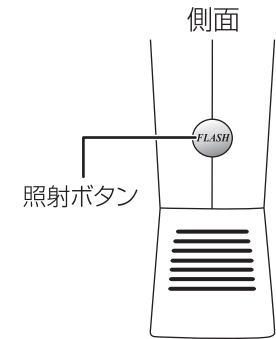

照射後出力液晶が点滅します。点灯に切り替わると再度照射が行えます。

⚠ 出力が上がるほど、次の発光できるまでの時間が長くなります。


⚠ 照射を準備している間にお肌を冷やすことおすすめします。

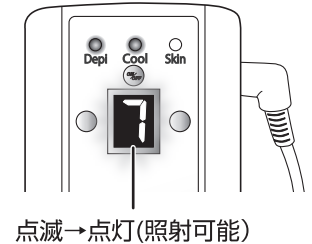

POINT


上手なあて方


発光面をずらしながらお肌に隙間なく照射を行ってください。

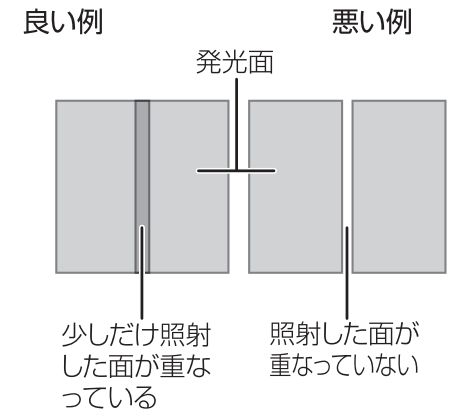

11. お肌を冷やす


照射後約5秒～10秒間お肌を冷やしてクールダウンさせてください。

 照射を準備している間にお肌を冷やすことおすすめします。


 ムダ毛モードを設定した場合は必ずお肌を冷やしてください。




熱さの感じやすい部位、照射後お肌が赤くなる方は、照射前にお肌を冷やしてから照射してください。

 照射前にお肌を冷やしても赤くなる場合、お手入れ後氷袋などでよく冷やしてください。


1. お手入れ終了
20分経過しましたら、タイマーが作動し、自動的に電源がOFFになります。

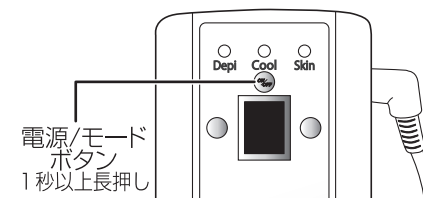

途中でお手入れを止める場合は電源ボタンを1秒以上長押しして、電源をOFFにしてください。

 再度お手入れする場合は本体を1時間以上休めてから使用してください。

2. ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、本体からACアダプターのプラグを抜いてください。

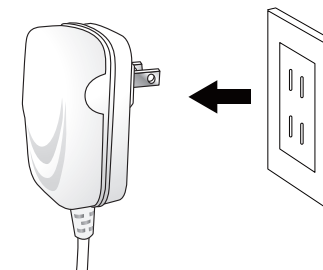

使い終わったら

お手入れ後のアフターケア

- お手入れ後当日は、お肌にほてりや赤みがなければ入浴は可能です。なるべく湯船やサウナに入るなど体温が上がるようなことは避けて、シャワー程度にすることをおすすめします。また、お肌を強くこすらないようにしてください。
- 化粧水などでお肌を保湿してください。
- お肌にほてりなどがある場合は氷袋などでお肌を冷やしてください。
- ムダ毛モードで照射後1日は、照射した部位を日光にあてないでください。

本体のお手入れ方法

- 本体が汚れた場合は、乾いた布または、せっけん水を浸してよく絞った布でふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、消毒用アルコールを用いてください。



必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いた状態で行ってください。



洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品などは変色の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

保管について

- 湿度や温度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では保管しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

廃棄について

- 本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

故障かな?と思ったら

症 状	推測される原因	対 応
電源ボタンを押してもランプが点灯しない。	▶ ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。	▶ ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	▶ ACアダプターのプラグが本体の差し込みに差し込まれていない。	▶ ACアダプターのプラグを本体の差し込みに正しく差し込んでください。
フラッシュが途中で消える。	▶ 照射中にセンサーから離れた。	▶ 3カ所のセンサーに触れてください。
	▶ センサーに触れていない。	▶ 3カ所のセンサーに触れてください。
フラッシュしない。	▶ お肌が乾燥している。	▶ 化粧水などでお肌を保湿してください。
	▶ キセノンランプの寿命。	▶ 弊社窓口までお問い合わせください。
冷えなくなった。	▶ 通気口をふさいでいる。	▶ 通気口をふさがないようにしてください。
	▶ 本体内部が熱を持っている。	▶ 電源をOFFにし、本体を1時間休めてください。
冷えない。	▶ 冷却設定をしていない。	▶ 電源をOFFにし、電源ボタンを押してください。

上記の方法で正常に動作しない場合は弊社窓口へご連絡ください。(詳しくはP26をご覧ください)

よくあるお問い合わせ

- Q** 毎日使用しても良いですか？
- A.** 照射する部位を変えて頂ければ、毎日使用しても大丈夫ですが、1度照射した部位は、最低2日間以上あけてください。
- Q** 妊娠中ですが、使用しても大丈夫ですか？
- A.** 身体に悪影響はありませんが、デリケートな時期なのでご使用はお控えください。出産後落ち着いてからご使用ください。
- Q** フラッシュを照射する前にムダ毛を剃らなければなりませんか？
- A.** お肌表面にムダ毛が伸びている状態でフラッシュを照射した場合、キセノンフラッシュの熱エネルギーがムダ毛に効率よく伝わらず、効果が得られにくくなります。ムダ毛が伸びている場合は必ず剃ってください。スキンケアのお手入れをする場合は毛を剃る必要はありません。
- Q** 顔に使用しても良いですか？
- A.** 頬より下はご使用いただけます。目元や唇などには絶対に照射しないでください。
- Q** 痛みはありませんか？
- A.** 痛みはありませんが、毛の色や太さ、肌の色、部位などで若干の熱さを感じる場合があります。無理のない範囲でお肌の様子を見ながら、徐々に出力を上げて、冷却をしながら照射してください。
- Q** 全身使用できますか？
- A.** お顔(頬より下)、ワキ、腕、指、ビキニライン、脚などの部位に照射可能です。

よくあるお問い合わせ

- Q** 日焼けをしても大丈夫ですか？
- A.** 日焼けした肌への照射やお手入れ後の日焼けは絶対にお止めください。
- Q** どれぐらいの間隔でお手入れすれば良いですか？
- A.** ムダ毛のお手入れは、最初の3ヶ月は週に2~3回を目安にお手入れを行い、4ヶ月目以降は週に1回を目安にお手入れを行ってください。効果の実感が感じられない場合は4ヶ月目以降でも週に2回のお手入れを継続してください。スキンケアのお手入れは週に2~3回目安にお手入れを行ってください。お肌が気になる方は毎日お手入れしていただいても大丈夫です。
- Q** 冷却ジェルを使っても良いですか？
- A.** ジェルは使用しないでください。本体の故障の原因になります。お肌を冷やすときは、冷却機能もしくは、氷袋などでお肌を冷やしてください。
- Q** お手入れを行った当日にお風呂は入れますか？
- A.** お手入れ後お肌にほてりや赤みがなければ入浴は可能ですが、湯船やサウナに入るなど体温が上がるようなことは避けて、シャワー程度にすることをおすすめします。また、肌を強くこすらないようにしてください。
- Q** 永久的な脱毛効果はありますか？
- A.** 永久脱毛とは異なり、お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻り生えてきます。
- Q** キセノンフラッシュの光って何ですか？
- A.** キセノンランプを応用して、ムダ毛ケアやスキンケア用に開発された一瞬のフラッシュで強力な可視光線を発光することができるランプです。現在エステサロンでも主流の美容法です。

製品仕様

■本体

商 品 名	クールフラッシュデピ
型 式	YMO-94RD
サ イ ズ	約6.5×3.8×13.5cm
重 量	約215g
材 質	ABS樹脂、アルミ
定 格 電 圧	DC 15V 2A
消 費 電 力	2.6W
ラ ン プ	キセノンランプ
出 力 調 整	10段階
製 造 国	日本


■ACアダプター

定 格 入 力	AC100V~240V 50Hz/60Hz
コードの長さ	約180cm
製 造 国	中国

※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

愛情点検

長年ご使用の美容器の点検を!



このような
症状はあり
ませんか?

▶

●電源を入れても時々動かない。
●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
●その他の異常がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源を抜いて必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービスについて

- ◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にお申し付けください。

保証書（取扱説明書の裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。または、お買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません。

修理を依頼される時

- ◆まずはお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①製品名	②型式	③故障内容
	④お買い上げ日	⑤お名前	⑥ご連絡先

◆保証期間中の場合

保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが保証書を添えて着払いで弊社窓口にお送りください。

◆保証期間が過ぎている場合

修理すれば使用できる商品について、ご要望により修理させていただきます。修理料金の仕組みをご参照の上、ご相談ください。現品を確認させていただいた上で、事前にお見積りさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担をお願いします。

◆修理料金の仕組み

部品代、技術料、送料の費用が発生します。



修理・商品に関するお問い合わせ
別売品のお求め

株式会社 オムニ エステ 事業部



フリーダイヤル 0120-77-55-22

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00 月~金(祝日除く)
都合によりお休みさせていただくことがありますので ご了承ください

メールでのお問い合わせはホームページよりお問い合わせください。

<http://kk-omni.co.jp/>