



Omni

取扱説明書 一般家庭用

OMC-BTHA003

EMS&RF

リフトブラシボーテ

保管用

保証書付



二次元コードを
読み取るだけで
手軽にお問い合わせ
できます。

EMS & RF Lift Brush Beaute

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
させていただきます。

- 本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。


もくじ

安全上のご注意	1~4
セット内容と各部の名称	5
ご使用前に	6
使いかた	7~10
使い終わったら	11
故障かな?と思ったら	12
製品仕様	13
保証とアフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(図記号の例)

 してはいけない内容です。  実行しなければならない内容です。

危険

次のような医用電子機器との併用は絶対にしない。



禁止

- ペースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用
 - 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用
 - 心電計などの装着型の医用電子機器との併用
 - 他の医用機器との併用
- ※ 医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。



禁止

- 本体には充電式電池を内蔵しています。この製品以外では使用しない。
- 取り出した充電式電池のチューブを絶対に剥がさない。充電しない。
- 火中への投入、加熱をしない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電、使用、放置しない。
- 釘でさしたり、衝撃を与えたり、分解、改造しない。
- 端子の+と-を金属などで接触させない。
発熱、発火、破裂の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

次のような方は使用しない。(ご使用前に医師に相談してください)

- 心臓障害 ● 内臓障害 ● 悪性腫瘍 ● 急性疾患
- 感染症疾患 ● 糖尿病 ● 血圧異常 ● アレルギー体質
- 有熱性熱疾患 ● 体調がすぐれない ● 妊娠中
- ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用 ● 睡眠薬を服用中
- 意思表示の出来ない ● 生理中 ● 泥酔 ● 幼児

次のような部位にはご使用しないでください。

- 耳の周辺 ● まぶた ● 口内 ● 陰部 ● 傷口 ● 粘膜部
- 皮膚に異常がある ● 体内に金属、シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる(事故や肌、身体のトラブルを生じる原因になります。)



必ず守る

異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。事故、発熱、破裂の原因になります。



禁止

分解、改造、修理はしない。火災、感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際はオムニサービスセンターにご連絡ください。



禁止

子供の手の届かない場所に保管し、子供だけで使用しない。事故やケガの原因になります。



禁止

火気(ストーブ・熱器具)や危険物のそばでは使用したり、保管しない。火災、感電、変形の原因になります。



禁止

直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所、温度が低い場所で使用、保管しない。発火、破裂、変形の原因になります。



水濡れ禁止

風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で充電したり、保管しない。絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でUSBプラグの抜き差しをしない。感電やショートの原因になります。



禁止

USBポートのすき間にピンや針金、金属などの異物を入れない。ショートさせない。感電、発熱、発火、ケガの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告



必ず守る

充電ケーブルを抜くときは、必ずUSBプラグを持って引き抜く。(金属部には触れない)

感電やコードの断線の原因になります。



必ず守る

USBポートにほこりが溜らないようにする。付着したほこりは乾いた布で拭く。

ショートや発熱、火災の原因になります。



禁止

充電ケーブルを引っ張って本体を持ち上げたり、移動させたりしない。

感電、ショート、発火、断線の原因になります。



必ず守る

USBプラグは根本まで確実に差し込む。

感電やショート、火災の原因になります。



禁止

傷ついた充電ケーブルは使用しない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。USBケーブルが傷ついているときは、オムニサービスセンターにご相談ください。



必ず守る

必ず付属の充電ケーブル、または規格のあった充電ケーブル(Type-C)を使用する。

感電やショート、火災の原因になります。



禁止

取扱説明書及び添付書類の記載以外の使用については絶対にしない。

事故、トラブルの原因になります。



必ず守る

身体に異常を感じたり、発生した場合はずぐに使用を中止する。

事故、トラブルの原因になります。



禁止

美容目的以外に使用しない。

事故、トラブルの原因になります。



必ず守る

使用時間、使用頻度は必ず守る。

お肌の炎症、トラブルの原因になります。



禁止

本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。

トラブルの原因になります。



禁止

落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えたりしない。

故障やケガ、事故の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



禁止

ご自身で操作ができない方は
使用しない。
事故やケガ、トラブルの原因になり
ます。



禁止

他の美容器との同時使用はし
ない。
事故やケガ、トラブルの原因になり
ます。



禁止

他の機器の部品を使用しな
い。
事故やケガ、トラブルの原因になり
ます。



禁止

本体内部に異物を入れない。
感電、故障、事故の原因になります。



禁止

電源を入れたり、切ったりの
繰り返しをしない。
痛みや強い刺激を受ける場合があ
ります。



必ず守る

強い痛みを感じた場合は、使
用を中断する。
そのまま使用を続けるとお肌のトラ
ブルの原因になります。



必ず守る

腕時計、眼鏡、貴金属のアクセ
サリー類を身体から外して使
用する。
事故やトラブルの原因になります。



禁止

お手入れ中に立ったり、動い
たりしない。
ケガや事故、トラブルの原因になり
ます。



必ず守る

使い始めはEMSの出力を弱に
設定し、お肌の様子を見ながら
使用する。
お肌の炎症やトラブルの原因にな
ります。




必ず守る


使用環境温度を守る。
使用環境温度は0℃～40℃です。
使用する場所、保管場所の室温を確
認する。故障の原因になります。

セット内容と各部の名称

本体

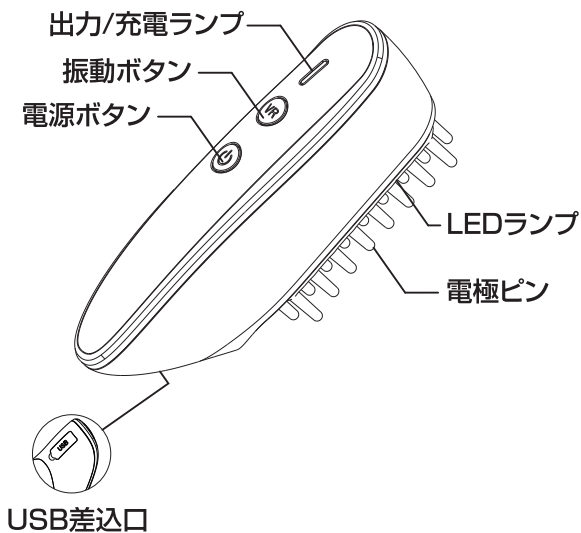

USB ケーブル (Type-C)

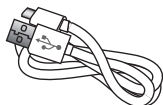

ご使用前に

1. 充電する場合

市販のUSB-ACアダプター(DC5V)をご使用ください。(別売)
パソコン、モバイルバッテリーでも充電は可能です。

2. 充電方法

USBケーブルのType-Cのプラグを本体のUSB差込口に差し込んで、反対側のType-AのプラグをUSBポート(USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリー)に接続してください。

USB-ACアダプターで充電する場合は上記の接続をした後、差し込みプラグをコンセントにしっかり差し込んでください。



- USB差込口に水が付着していないことを確認してから差し込んでください
- はじめてご使用の際は、フル充電をしてください
- はじめての充電や長期間ご使用しなかった時は、充電時間が長くなる場合があります
- パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなどの消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください
- 充電しながらのご使用はできません

3. 充電開始

出力 / 充電ランプが点灯し、充電を開始します。

4. 充電完了

出力/充電ランプが消灯しましたら充電完了です。
USBケーブルを本体から抜いてください。
フル充電まで約2時間掛かります。

使いかた

1. 電源をONにする

電源ボタンを長押し(約1秒)してください。
出力/充電ランプが1個点灯し、10分タイマーが作動します。

2. 出力設定(RF約4秒→EMS約6秒が交互に出力)

電源ボタンを押すたびにEMS&RFの出力が上がり
3段階まで設定可能です。



出力の設定を変更すると10分タイマーが新たに更新します

3. 振動設定

振動ボタンを押すと振動がONになります。
押すたびにモードが切り替わります。
3種類の振動モードがあります。



4. 電源をOFFにする

お手入れの途中で電源をOFFにする場合は、電源ボタンを
長押し(約1秒)してください。

5. お肌または頭皮を濡らす

お肌をお手入れする場合は、化粧水や水を塗布してください。
頭をお手入れする場合は、水などで頭皮をしっかり濡らした状態にしてください。または、シャンプーで泡立てた状態、トリートメント(クリーム、油分の含まれたものは除く)を塗布した状態にしてください。

6. あて方

25本の電極ピンがお肌に均等に当たるように動かしてください。

7. お手入れ時間の目安

一部位1回10分以内を限度にお手入れを行ってください。
毎日お手入れ可能です。但し、翌日以降のお手入れは24時間以上空けてください。



注意

- 強く当てすぎないようにしてください
強く当てるとお肌や頭皮を傷つける原因になります
- 本体を水の中に落としたり、沈めたりしないでください
完全防水仕様ではありません
- お肌や頭皮の状態を見ながらお手入れしてください

8. 動かし方

頬

下から上に動かす



フェイスライン

あご付近からこめかみに
向かってすべらせる



まぶたへのご使用はさけてください。

あご～首

あご下付近から耳元に向かって
すべらせて、耳元から首筋に沿
って肩まですべらせる



側頭部

側頭部の髪をかきあげるように
斜め上に流す



使いかた

前頭部～側頭部

髪の毛の生え際をほぐすように
上下に細かく動かす



後頭部

後頭部全体をなでるように
上下に動かす



デコルテ

鎖骨のくぼみに約5秒間
当てる。鎖骨の上を内側
から外側にすべらせる



デコルテ

鎖骨の下を内側から
外側にすべらせる



のどぼとけや鎖骨へのご使用はさけてください。

使い終わったら

本体のお手入れ方法

- 本体が汚れた場合、乾いた布またはせっけん水を浸してよく絞った布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は消毒用アルコールを用いてください。



- 電源がOFFの状態で行う
- 洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、熱湯、薬品などは変色の原因となりますので、絶対に使用しない

保管について

- 直射日光の当たる所、湿度や温度の高い所、液体の掛かる所では保管しない。
- 子供の手の届かない場所に保管する。
- 充電電池は劣化するため、ご使用しない場合でも3ヶ月に1度を目安に充電を行ってください。

廃棄について

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄の際はリチウム電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 必ず電池残量を使い切ってください。
- 廃棄する場合は、各自治体の条例に従って処分してください。



故障かな?と思ったら

症 状	推測される原因	対 応
電源が入らない	▶ 充電切れ	▶ 充電を行ってください
充電してもすぐに使えなくなる	▶ 充電池の寿命	▶ オムニサービスセンターまでご連絡ください (故障や事故の原因になるためお客様ご自身で交換はできません)
充電ができない	▶ 充電ケーブルのType-AのプラグがUSBポートにしっかり接続されていない	▶ Type-AのプラグをUSBポートにしっかり差し込んでください
	▶ 充電ケーブルのType-Cのプラグが本体のUSB差込口にしっかり接続されていない	▶ Type-Cのプラグを本体USB差込口にしっかり差し込んでください
EMSの刺激が弱い	▶ お肌が乾燥している	▶ 水や化粧水、ジェルを塗布して、お肌を湿らせてください
EMSの刺激が強い	▶ EMSの出力が強い	▶ 電源ボタンを押してEMSの出力を落としてください
	▶ お肌が乾燥している	▶ 水や化粧水、ジェルを塗布して、お肌を湿らせてください

上記の方法で正常に動作しない。充電池の交換はオムニサービスセンターまでご連絡ください。(詳しくはP14をご覧ください)



警 告

ご自身で分解・修理・改造はおやめください

製品仕様

型番	: OMC-BTHA003
サイズ	: 約13×5.5×2.6cm
重量	: 約130g
入力電圧	: DC5V1A
使用電池	: リチウムイオン蓄電池DC3.7V1000mAh
材質	: ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス
充電方式	: USB Type-C
充電時間	: 約2時間
防水性能	: IPX5
製造国	: 中国

※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

愛情点検



点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために
日頃から点検をおこなってください

★このような症状はありませんか？

★異常があれば

- 本体が熱くなる
- 電源を入れても動かない
- こげくさいにおいがする
- 充電ができない
- その他異常がある

使用中止

故障や事故防止のため使用を
中止し、電源をOFFにしてオム
ニサービスセンターにご相談
ください

保証とアフターサービスについて

- ◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくはオムニサービスセンターにお申し付けください。

保証書(取扱説明書の裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。
または、お買い上げ日、販売店がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません。また、オークションやフリーマーケットなどの転売や中古販売及び譲渡された物品において発生した故障・損傷・事故などにつきましては一切の責任を負いかねます。

修理を依頼されるとき

- ◆お買い上げ販売店、もしくはオムニサービスセンターにご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①商品名	②型番	③故障内容
	④お買い上げ日	⑤お名前	⑥ご連絡先

- ◆保証期間中の場合
保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが、保証書を添えて着払いでオムニサービスセンターにお送りください。
- ◆保証期間が過ぎている場合
修理すれば使用できる商品について、ご希望により修理をさせていただきます。修理料金の仕組みをご参照の上ご相談ください。現品を確認させて頂いた上で事前にお見積りさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担をお願いします。
- ◆修理料金の仕組み
部品代、技術料、送料の費用が発生します。



修理は

修理・商品に関するお問い合わせ 株式会社オムニ サービスセンター

固定電話からは ☎ 0120-77-55-22 (通話料無料)

携帯電話からは 078-802-8504 FAX 078-802-8506

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝日除く)

都合によりお休みさせて頂くことがあります。

〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町3-2-8

お電話が繋がらない場合は
ホームページよりお問い合わせください。

<http://kk-omni.co.jp/>



二次元コードを
読み取るだけで
手軽にアクセス
できます。

保証書

製品名	リフトブランポーター	型番	OMC-BTHA003
お買い上げ日	年 月 日 より1年間		
お客様	お名前	電話番号	
	ご住所		
販売店			

本保証書は、お買い上げ日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。本保証書のご提示やお買い上げ明細書がない場合は、保証期間内であっても保証の対象とならない場合がありますので、お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。またはお買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。

【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくはオムニサービスセンターにご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】

1. 本保証書もしくはお買い上げ明細書などのご提示がない場合。
2. 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
3. オークション、フリーマーケットなどの転売や中古販売及び譲渡された物品において発生した故障、損傷、障害、事故。
4. 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
5. 火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
6. お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
7. ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

【その他】

1. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
2. お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
3. 保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくはオムニサービスセンターにお問い合わせください。
4. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、オムニサービスセンターにご連絡ください。
5. 保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、オムニサービスセンターまでお問い合わせください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
7. 充電電池は保証対象外です。

発売元 株式会社 オムニ 〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町3丁目2番8号

<http://kk-omni.co.jp/> ☎0120-77-55-22 (通話料無料)