

# 保証書

製品名	シルクフェイサー		
お買い上げ日	年 月 日 より1年間		
お客様	お名前	見本	
	ご住所		
	お電話番号		
販売店			

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。

本保証書のご提示がない場合、保証期間内であっても保証対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

#### 【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

#### 【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

#### 【保証期間中でも有料修理となる場合】

- 1.本保証書のご提示がない場合。
- 2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- 4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
- 5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
- 6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
- 7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要な場合。


#### 【その他】

- 1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- 3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
- 4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
- 5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

Omni

取扱説明書  
一般家庭用

保管用  
保証書付

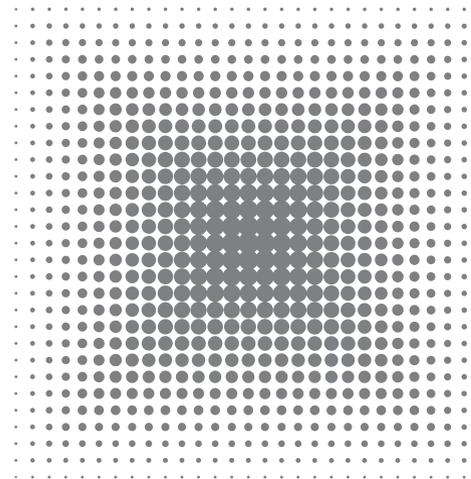

## SILK FACER

シルクフェイサー

- お買い上げいただき誠にありがとうございます。ご了承ください。
- 本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~4
セット内容と各部の名称	5
ご使用前に	6
使い方	7~12
使い終わったら	13
故障かな?と思ったら	14
保証とアフターサービスについて	15
製品仕様	16
よくあるお問い合わせ	17~18
保証書	裏表紙

## 安全上のご注意

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

 **注意** 「障害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(図記号の例)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 危険

次のような方は使用しない。



禁止

- ① ペースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用
- ② 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用
- ③ 心電計などの装着型の医用電子機器との併用
- ④ 他の医用機器との併用  
医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。

## 安全上のご注意

### 警告

次のような方は使用しない。

(ご使用前に医師に相談してください)

- 心臓障害
- 内臓障害
- 悪性腫瘍
- 急性疾患
- 感染症疾患
- 糖尿病
- 血圧異常
- アレルギー体質
- 有熱性熱疾患
- 健康がすぐれない
- 妊娠中
- ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用
- 睡眠薬を服用中
- 意志表示の出来ない
- 生理中
- 泥酔
- 幼児



禁止

次のような部位には使用しない。

(事故やトラブルの恐れがあります。)

- 眼球
- まぶた
- 耳の周辺
- 口内
- 陰部
- 傷口
- 粘膜部
- 皮膚に異常がある
- 体内に金属、シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる



禁止

### 警告

身体に異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。  
やけどや水泡、かゆみ、炎症などお肌に異常が生じた場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。



必ず守る

美容目的以外に使用しない。  
取扱説明書及び添付書類記載以外の使用については絶対にしない。  
使用時間及び使用頻度は必ず守る。  
本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。  
お肌を傷つけたり、炎症、やけど、事故、トラブルの原因になります。

## 安全上のご注意

### 警告


<p> 禁止</p> <p>ACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、挟み込んだり、重い物を乗せたりしない。</p> <p>火災や感電、ショート、やけどの原因になります。</p>	<p> 必ず交流100Vで使用する。 事故、火災、故障の原因になります。</p> <p>必ず守る</p> <p> 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。 事故、火災、故障の原因になります。</p> <p>必ず守る</p> <p> 電源プラグを抜く</p>
<p> 禁止</p> <p>ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。</p> <p>感電やショートの原因になります。</p> <p>水濡れ禁止</p>	<p> 必ず専用のACアダプターを使用する。 事故、火災、故障の原因になります。</p> <p>必ず守る</p>
<p> 必ず守る</p> <p>ACアダプターを本体やコンセントから抜くときは必ずACアダプターを持って抜く。</p> <p>感電の原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>ACアダプターにほこりが付着しないよう定期的に清掃する。 ほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。</p>
<p> 分解禁止</p> <p>分解、改造、修理はしない。 感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>本体から異臭や異常が発生した場合は使用を中止する。 そのまま使用すると火災、事故の原因になります。</p>
<p> 水濡れ禁止</p> <p>風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。 絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。</p>	<p> 禁止</p> <p>本体内部に異物を入れない。 事故や火災、感電、故障の原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>子供の手の届かない所に保管し、子供には使用しない。 事故やトラブルの原因になります。</p>	<p> 禁止</p> <p>火気(ストーブ・熱器具)や危険物のそばでは使用したり、保管しない。 火災、爆発、変形の原因になります。</p>

## 安全上のご注意

### 注意

<p> 禁止</p> <p>他の美容器との同時使用はしない。 事故やケガ、トラブルの原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>使い始めはEMSの出力を弱に設定し、お肌の様子を見ながら使用する。 お肌の炎症の原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>他の機器の部品を使用しない。 事故やケガ、トラブルの原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>強い痛みを感じた場合は使用を中断する。 そのまま使用を続けると悪化する原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>落としたり、ぶつけたりしない。 故障やケガ、事故の原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>腕時計、眼鏡、貴金属のアクセサリー類を身体から外して使用する。 そのまま使用を続けると悪化する原因になります。</p>
<p> 禁止</p> <p>お肌にプローブ面を1箇所20秒以上当てない。 お肌のトラブルの原因になります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>必ず化粧水や水溶性ジェルを塗布して使用する。 お肌のトラブルの原因になります。</p>

## セット内容と各部の名称

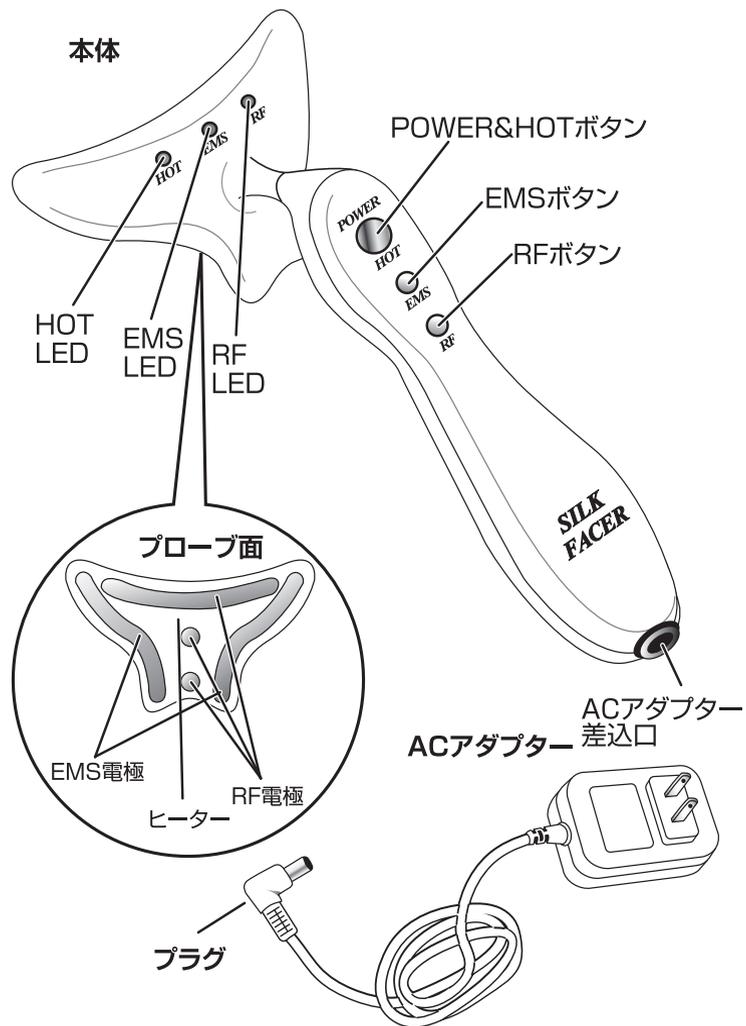

※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

## ご使用前に

### 1. お肌をきれいにしましょう


お手入れする前に化粧やお肌の汚れを落として、素肌の状態にしてください。




お肌に化粧や汚れが残っていると、EMSやRFの刺激が伝わりにくくなり、十分な効果が得られません。



### 2. ACアダプターのプラグを本体のACアダプター差込口に差し込んでください。

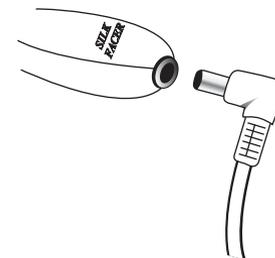

### 3. ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)に差し込んでください。

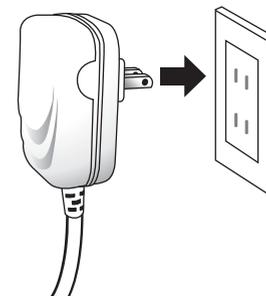

### 4. 化粧水を塗布

お手入れする部分にお肌が軽く湿る程度、化粧水を塗布してください。




塗りすぎないようにしてください。本体の故障の原因になります。特にジェルを塗布する際は注意してください。

## 使い方

### 1. 電源ON

本体のPOWERボタンを押してください。  
電源がONになり、下記のモードが機能します。  
HOTモード:弱  
EMSモード:OFF  
RFモード:OFF

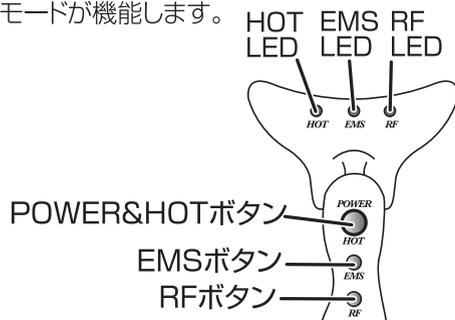

### 2. モード設定

各機能のモード設定が行えます。  
各機能のボタンを押すたびにモードが切り替わります。  
お好みに合わせて設定を行ってください。

それぞれの機能を単独でご使用頂くよりも3つの機能を同時にご使用頂いた方が効率のよい、効果的なお手入れが可能です。

#### 温熱モード設定(HOTボタン)

温熱によりお肌を温めます。



## 使い方

### EMSモード設定(EMSボタン)

EMSの電気刺激によりお肌や筋肉に刺激を与え、ストレッチを行います。



### RFモード設定(RFボタン)

ラジオ波の高周波の熱エネルギーによりお肌や筋肉の深部を温めます。




電源がONの状態ですべての機能をOFFにした場合各LEDが順番に点滅します。

## 使い方

### 3. プローブ面の動かし方


先端のプローブ面のあらゆる部分に当てやすいように左右にスイングする可動式になっています。お手入れする部分に合わせて調整してください。

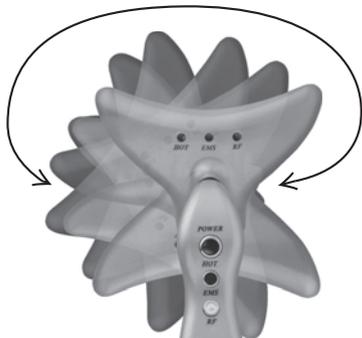

無理に回すと壊れる原因になります。

### 4. プローブ面のあて方

プローブ面の電極とお肌が触れるように当ててください。

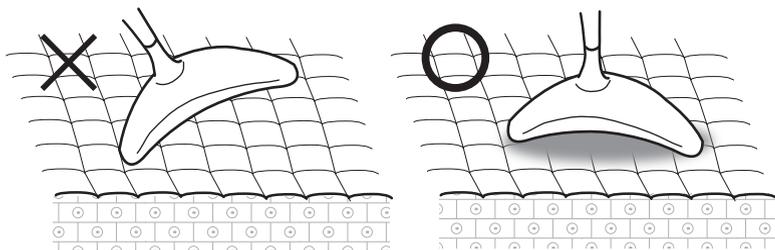

## 使い方


### 5. プローブ面をあてる位置

お手入れする部分に合わせてプローブ面の角度を調整して1箇所10~20秒を目安に当ててください。頬や目尻は軽く持ち上げるように当ててください。お顔全体のお手入れ時間の目安は5~10分です。


口もと




頬

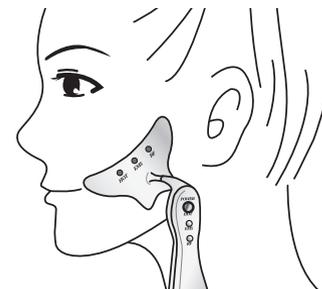

おでこ

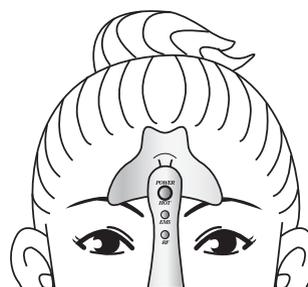

目尻

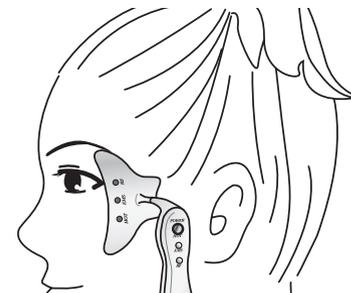

必ず素肌(お化粧を落とした状態)で化粧水や水溶性のジェルを塗布してから当ててください。




化粧水やジェルが乾いてきたら再度塗布してください。

## 使い方

### 眉間



### 首

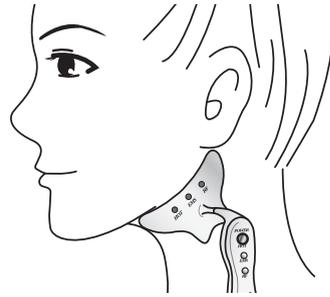

必ず素肌(お化粧を落とした状態)で化粧水や水溶性のジェルを塗布してから当ててください。



化粧水やジェルが乾いてきたら再度塗布してください。




熱すぎると感じた際は、すぐにお肌から離してください。やけどや炎症の原因になります。

## 使い方


### 6. お手入れをやめる場合

POWERボタンを1秒以上長押ししてください。全てのLEDが消灯し、電源がOFFになります。

15分間操作を何も行わないと自動的に電源がOFFになります。

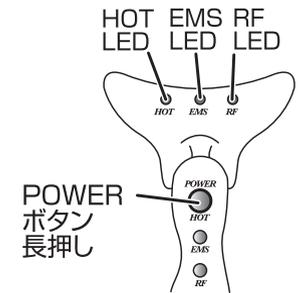

- ### 7. ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、本体からACアダプターのプラグを抜いてください。

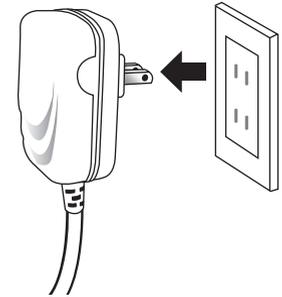

- ### 8. プローブ面についた化粧水やジェルは乾いたやわらかい布などで毎回きれいに拭き取ってください。

## 使い終わったら

### 本体のお手入れ方法

本体が汚れた場合は、乾いたやわらかい布または、せっけん水を浸してよく絞った布でふき取ってください。



必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、除光液、薬品などは変色の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

### 保管について

- 湿度や温度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では保管しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

### 廃棄について

本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

## 故障かな?と思ったら

症状	推測される原因	対応
POWERボタンを押してもランプが点灯しない	ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。	ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	ACアダプターのプラグが本体の差込口に差し込まれていない。	ACアダプターのプラグを本体の差込口に正しく差し込んでください。
温かさが感じない	HOTモードの設定をしていない。	POWERボタンを押して設定をしてください。
EMSの刺激が感じない	EMSモードの設定をしていない。	EMSボタンを押して設定をしてください。
お肌がチクチクする、赤くなる	お肌の状態が敏感になっている。	お肌の状態が良くなるまで使用しないでください。
	EMSの出力が強い。	EMSの出力を落としてください。
	お肌が乾燥している。	化粧水もしくは、ジェルを塗布してください。
動作が止まる	ACアダプターのプラグが抜けている。	ACアダプターのプラグをしっかりと差し込んでください。

上記の方法で正常に動作しない場合はオムニエステ事業部までご連絡ください。  
(詳しくはP15をご覧ください)

### お肌にこんな症状がおこったら

お肌に当てるとヒリヒリする	お肌の状態が敏感になっている	お肌の状態が良くなるまで使用しないでください。(医師にご相談ください。)
お肌にトラブルが起こる	体調、ストレス、体質、内臓疾患など	

## 製品仕様

## 製品仕様

商品名	シルクフェイサー
型式	OM-FM04
サイズ	14×8×9cm
重量	50g
材質	ABS樹脂、ステンレス
消費電力	8W
定格電圧	DC12V1A
出力切替	HOTモード 3段階(弱/中/強) EMSモード 3段階(弱/中/強) RFモード 1段階
製造国	中国

## ACアダプター

製造国 中国

※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

## 保証とアフターサービスについて(よくお読みください)

- ◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にお申し付けください。

## 保証書(取扱説明書の裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。または、お買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。  
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません

## 修理を依頼される時

- ◆まずはお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①製品名	②型式	③故障内容
	④お買い上げ日	⑤お名前	⑥ご連絡先

## ◆保証期間中の場合

保証書の規定に従って修理させて頂きますので、恐れ入りますが、保証書を添えて着払いで弊社窓口にお送りください。

## ◆保証期間が過ぎている場合

修理すれば使用できる商品について、ご要望により修理させて頂きます。修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。現品を確認させて頂いた上で、事前にお見積もりさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担はお願いします。

## ◆修理料金の仕組み

部品代、技術料、送料の費用が発生します。



修理は

修理・商品に関するお問い合わせ  
別売り品のお求め

株式会社 オムニ エステ 事業部

フリーダイヤル ☎0120-77-55-22(通話料無料)

携帯電話専用 078-802-8504 FAX 078-802-8506

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝日除く)  
都合によりお休みさせて頂くことがあります。

メールでのお問い合わせは  
ホームページよりお問い合わせください。

<http://kk-omni.co.jp/>



## 愛情点検



このような  
症状はあり  
ませんか?

- 電源を入れても時々動かない。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

お願い

故障や事故防止のため、  
使用を中止し、電源を抜  
いて必ず販売店にご相談  
ください。

## 長年ご使用の美容器の点検を!

## よくあるお問い合わせ

### Q.いつお手入れするのが効果的ですか？

A.お風呂上がりのお肌のきれいな状態で温まっているときが最適です。

### Q.指定されている時間を超えてお手入れしても大丈夫ですか？

A.過度のお手入れは、お肌に負担を与えてトラブルの原因になるため、お手入れ時間は必ず厳守してください。

### Q.お手入れはどれぐらいの頻度であれば良いですか？

A.通常2～3日に1回のお手入れで充分ですが、症状が特に気になる方は、毎日お手入れして頂いてもよいです。

### Q.妊娠中ですが、使用しても大丈夫ですか？

A.身体に悪影響はありませんが、デリケートな時期なのでご使用はお控えください。出産後落ち着いてからご使用ください。

### Q.目元付近をお手入れした場合、眼球に悪影響はありませんか？

A.お肌や筋肉に働きかけるので、眼球に悪影響を与える心配はありません。

### Q.お肌に何も塗らないでお手入れしても良いですか？

A.化粧水やジェルを塗っていないと、EMSやRFの刺激が強くなりお肌が赤くなったり、炎症する原因になるので必ず化粧水もしくはジェルを塗ってください。

### Q.化粧水の代わりに乳液やクリームを使用しても良いですか？

A.クリームや乳液は油分が含まれているので、EMSやRFの刺激が伝わりにくくなるのでご使用頂けません。必ず油分が含まれていない化粧水やジェルをお使いください。

### Q.プローブ面が大きくてお肌に電極が一部しか当たらず浮いてしまうのですが？

A.EMSの2極の電極、RFの3極の電極面が全てお肌に触れていなくても、EMSの電極、RFの電極、それぞれ2極の電極の一部が触れていればお肌に刺激が伝わります。

## よくあるお問い合わせ

### Q.ピリピリとした刺激がするのですが？

A.EMSはピリピリとした刺激を感じる場合があります。気になる場合はお風呂上りにお手入れして頂くと刺激が緩和されます。EMSの出力を強に設定されている場合は、出力を弱にしてください。痛みを感じたり、お肌が赤くなったり、炎症した場合はすぐにご使用をおやめください。

### Q.お手入れ中に目がチカチカ、フラッシュした様な感じになるのですが？

A.異常はありません。気になる場合はプローブ面を目尻付近から少し離してください。刺激が強く感じたり、不快に感じる場合は出力を弱に設定して頂くか、もしくはEMSをOFFに設定してください。

### Q.お手入れ中に口の中に違和感を感じるのですが？

A.異常はありません。気になる場合はプローブ面を頬の付近から少し離してください。刺激が強く感じたり、不快に感じる場合は出力を弱に設定して頂くか、もしくはEMSをOFFに設定してください。